

## 送风定温恒温箱

Economy Mechanical Convection Ovens | 经济型、定值运行

## DKM310C/410C/610C

使用温度范围	室温+10~260℃	温度分布精度	±2.5℃(at 210℃)	内容积	27L	90L	150L
--------	------------	--------	----------------	-----	-----	-----	------

## 价格低廉的定值运行款，操作简单的送风定温恒温箱。

## ■ 操作性·功能

- 易操作，定值运行、快速自动停止运行、自动停止运行、自动开始运行均可实现。
- 可通过专用运行功能菜单键及上下键实现数码设定。
- 可设定超温保护、偏差修正、按键锁。

## ■ 安全性·保护

- 拥有自诊断回路（温度输入异常）、停电补偿功能、偏差修正功能、防止过电流的漏电保护开关、独立过升防止器等安全功能。



## ■ 规格

型号	DKM310C	DKM410C	DKM610C	
方式	强制送风循环			
性能	使用温度范围	室温 + 10 ~ 260℃		
	温度调节精度	±1℃ (at 210℃)		
	温度分布精度	±2.5℃ (at 210℃)		
6	最高温度到达时间	约60分钟 (室温 + 10 ~ 210℃)、约90分钟 (室温 + 10 ~ 260℃)		
	内装	不锈钢板		
构成	外装	冷轧钢板，表面耐药品性涂装		
	断热材	玻璃纤维		
	加热器	不锈钢加热管		
		0.8KW	1.2KW	1.5KW
送风机风叶/马达	离心风叶，马达10W×1			
引线孔	内径30mm (右侧面1个)			
排气口	内径30mm×2，上面			
控制	温度控制方式	PID控制		
	温度设定方式	通过功能菜单键及上下键实现数码设定		
	温度表示方式	测定温度显示：绿色4位LED，数码显示		
		设定温度显示：红色4位LED，数码显示		
	定时器	1分~99小时59分以及100小时~999小时50分 (带定时等待功能)		
运行功能	定值运行、快速自动停止运行、自动停止运行、自动开始运行			
附加功能	偏差修正功能、按键锁功能、停电补偿功能			
传感器	温度调节器：K型热电偶，超温保护用：液胀式温控器			
安全装置	自诊断功能 (温度传感异常、SSR短路、自动过升防止)、按键锁功能、独立过升防止器、防止过电流的漏电保护开关			
规格	内尺寸 (宽×深×高mm)	300×300×300	450×450×450	600×500×500
	外形尺寸 (宽×深×高mm)	410×451×670	560×601×820	710×651×870
	内容积	27L	90L	150L
	棚板承重	15kg/层		
	棚板层数	6层	9层	12层
	棚受间距	35mm		
	电源 (50/60Hz) 额定电流	AC220V 4.5A	AC220V 6.5A	AC220V 7A
	重量	约35kg	约50kg	约65kg
附属品	棚板	不锈钢冲压网板		
	棚受	4件		
选购品	架台	ON30C	ON61C	
	重叠支架	—	OD40C	OD60C
其它	棚板 (1件棚板包含2件棚受)、引线孔 (30/50mm)			

1 灭菌器

2 造粒干燥装置

3 马弗炉

4 恒温箱干燥箱

5 恒温培养箱

6 等离子装置

7 纯水制造装置

8 恒温水槽

9 恒温水循环

10 旋转蒸发仪

11 冷冻干燥冷阱

12 搅拌器振荡器

13 清洗机

14 选购品

强制送风  
循环

自动过升  
防止

过升  
防止器

自诊断  
功能

锁键功能

停电补偿  
功能

过电流漏  
电断路器

CE认证



### 控制面板



### 引线孔 (标准配置)



### 排气口 (标准配置)




### 内槽




DKM610C

### 温度上升曲线

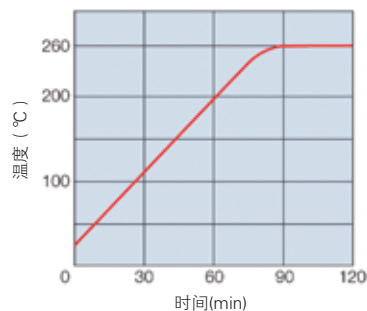


### 尺寸图 (mm)

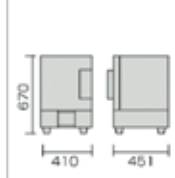

[DKM310C]



[DKM410C]

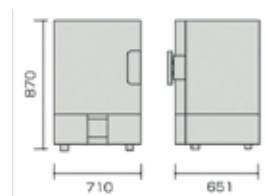

[DKM610C]

- 灭菌器 1
- 造粒干燥装置 2
- 马弗炉 3
- 恒温箱干燥箱 4
- 恒温培养箱 5
- 等离子装置 6
- 纯水制造装置 7
- 恒温水槽 8
- 恒温水循环 9
- 旋转蒸发仪 10
- 冷冻干燥冷阱 11
- 搅拌器振荡器 12
- 清洗机 13
- 选购品 14